

**AT51043**

**NÁVOD NA POUŽITIE, CHODÍTKO**



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku a zraneniu osôb.

**UPOZORNENIE:** Skontrolujte všetky diely, či neboli poškodené pri preprave. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

### POUŽITIE/INDIKÁCIE

Výrobok je určený na podporu mobility osôb s obmedzenou schopnosťou chôdze. Rehabilitačné chodítko je určené pre jednu osobu. Výrobok nájde využitie v:

- Tréning rovnováhy: Rehabilitačné chodítko umožňuje pacientom trénovať udržiavanie rovnováhy, čo je dôležité v procese rehabilitácie po úraze alebo neurologickom ochorení.
- Udržiavanie správneho držania tela: Pacienti môžu používať rehabilitačné chodítko na nácvik správneho držania tela, čo je dôležité najmä pre ľudí s poruchami držania tela alebo problémami so stabilitou.
- Zlepšenie pohybovej koordinácie: Cvičenia s rehabilitačným chodítkom môžu pomôcť zlepšiť motorickú koordináciu a kontrolu pohybov, čo je dôležité pre ľudí s neurologickými poruchami.
- Pomoc pri rehabilitácii po úraze: Rehabilitačné chodítko sa môže používať v procese rehabilitácie po úrazoch dolných končatín a pomáha pacientom postupne získať späť pohyblivosť.
- Zvyšovanie samostatnosti: Pre niektorých pacientov môže byť rehabilitačné chodítko nástrojom na zvýšenie samostatnosti v každodennom živote, pretože umožňuje samostatný pohyb.

### KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.


- Nedostatok stability chrbtice: Ľudia s vážnymi problémami so stabilitou chrbtice alebo poraneniami chrbtice nemusia byť vhodnými kandidátmi na používanie rehabilitačného chodítka, pretože to môže zvýšiť riziko ďalšieho zranenia.
- Nekontrolované záchvaty: U ľudí s nekontrolovanými záchvatmi alebo epilepsiou môže byť používanie rehabilitačného chodítka nebezpečné pre pacienta aj pre jeho okolie.
- Nedostatočná fyzická sila: U ľudí s veľmi obmedzenou fyzickou silou môže byť používanie rehabilitačného chodítka ťažké alebo neúčinné. V takýchto prípadoch môže byť potrebný iný prístup k rehabilitácii, napríklad manuálna terapia alebo cvičenia na podporu svalovej sily.
- Problémy s rovnováhou: U pacientov s vážnymi problémami s rovnováhou môže byť používanie chodítka nebezpečné, pretože môže zvýšiť riziko pádu a ďalších zranení.
- Nesúlad rehabilitačného chodítka: Nesprávne prispôsobenie rehabilitačného chodítka pacientovi môže viesť k ďalším zraneniam alebo zhoršeniu stavu.

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE




### MONTÁŽ RUKOVĚTÍ

Rozložte hlavný rám a podržte ho v stabilnej polohe. Potom stlačte oranžové tlačidlo, aby ste mohli zasunúť rukoväť do rúrky rámu. Rukoväť zasúvajte dovnútra, kým nebudete počuť cvaknutie/zamknutie.

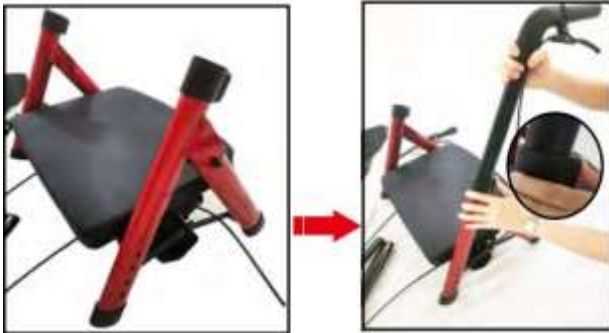

### MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIES

Stlačte tlačidlo pružiny, aby sa predné koleso dalo zasunúť do hlavného rámu. Uistite sa, že pružinové tlačidlo vychádza z otvoru a počujete "cvaknutie".

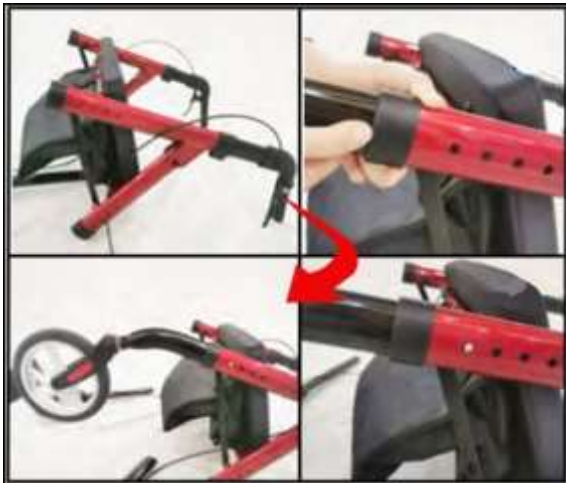

### MONTÁŽ ZADNÉHO KOLESA

Stlačte tlačidlo pružiny a vložte rúrku zadného kolesa do hlavného rámu, budete počuť "cvaknutie". Uistite sa, že brzdové lanko nie je zaseknuté.



### VÝŠKOVO NASTAVITELNÁ RUKOVÄŤ

Stlačením oranžového tlačidla nastavte výšku nahor alebo nadol.



### MONTÁŽ OPERADLA

Odskrutkujte skrutku operadla a potom vložte rúrku rukoväte do plastových častí. Kľučka slúži na pevné upevnenie operadla k chodítku.



### NASTAVENIE VÝŠKY NA KOLESÁCH

Stlačením tlačidiel pružín na prednej a zadnej rúrke nastavte výšku chodítka.



## SKLADANIE CHODÍTKA

Ak chcete chodítko zložiť, potiahnite tyč pod sedadlom.




## NASTAVENIE PARKOVACÍCH BRÝD



Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdú, zatlačte rukoväť brzdy smerom nadol.

Ak chcete parkovacie brzdy uvoľniť, opäť uchopíte rukoväť brzd a ťahajte ich smerom nahor, kým sa neuvoľnia.

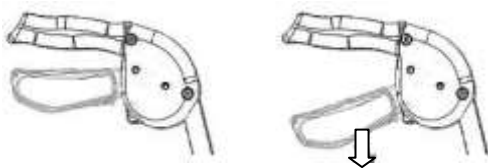

(odomknutý stav) vs (zamknutý stav)

## POUŽÍVANIE RUČNÝCH BRÝD

1. Potiahnite brzdú smerom k rukovätiam.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  - A. ZABRZDENÉ - držte rukoväť brzdy hore:
  - B. ODBRZDENÉ (pohyb) - uvoľnite rukoväť brzdy

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Robustné gumené zadné kolesá, 8"

Predné kolesá, 10"

Rám: hliník

Maximálne zaťaženie: Nosnosť: 180 kg

Výška po sedadlo: 56 cm až 62 cm (4 stupne nastavenia)

Rozmery sedadla: šírka sedadla s vankúšom 48 cm/ šírka sedadla (vzdialenosť medzi rukovätami) 56 cm/ hĺbka 36 cm/ výška 5 cm

Veľkosť chodítka: hĺbka 79 cm/ šírka 68 cm/ výška 97 cm - 108 cm

Nastaviteľná výška rukovätí: 97-108cm (6 stupňov regulácie)

Hmotnosť: 10 kg



**Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa!**

## OBSAH BALENIA:

Chodítko, návod na použitie

**UPOZORNENIE:**

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

**UPOZORNENIE:**

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

**UPOZORNENIE:** je zakázané používať výrobok na iný ako určený účel!

**UPOZORNENIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.

**CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV**

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže užívateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

**UPOZORNENIE**

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chodítko pri náhodnom kontakte s prekážkami, ktoré sa vyskytujú na ceste.

Vždy sa uistite, že je chodítko úplne rozložené a nemá žiadne uvoľnené časti.

Ak chodítko nepoužívate, skontrolujte, či sú zapnuté (zaistené) parkovacie brzdy.

Pred použitím skontrolujte celkový stav kolies a ich bezpečné upevnenie.

Pred použitím skontrolujte, či brzdy fungujú.

Pri používaní chodítka dávajte pozor na okolie, aby ste sa pohybovali bezpečne.

Chodítko sa nesmie používať ako invalidný vozík. Výrobok je určený na pomoc pri chôdzi.

Nesadajte na chodítko, ak nie sú zapnuté (zaistené) parkovacie brzdy, pretože hrozí, že sa chodítko pohne, čo môže viesť k nebezpečenstvu.

Opatrne a pomaly si sadnite na sedadlo. V prípade potreby požiadajte o pomoc tretiu osobu.

Skontrolujte, či sú nastaviteľné rukoväte správne zaistené.

Nevkladajte ruky do miest, kde sa chodítko ohýba, aby ste sa nezranili.

Na rukoväť alebo brzdy nevešajte žiadne predmety.

**ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ**

Nezabudnite chodítko pravidelne kontrolovať. Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a gombíky pevne dotiahnuté. Skontrolujte, či brzdy fungujú správne. Skontrolujte opotrebovanie kolies. Skontrolujte voľnosť brzdovej hadice a pevnosť lanka. Skontrolujte, či nechýbajú nejaké komponenty. Ak sa zistia akékoľvek nedostatky alebo poruchy, chodítko nepoužívajte, pretože to predstavuje riziko nebezpečenstva.

Chodítko sa dá čistiť vlhkou drhnicou podložkou a jemným mydlom. V prípade potreby možno použiť jemný dezinfekčný a antibakteriálny prostriedok. Neotierajte hrubými predmetmi.

Dávajte pozor, aby na rukovätiach alebo sedadle nezostali zvyšky čistiacich prostriedkov, pretože pri používaní sa môžu stať klzkými.

**UPOZORNENIE: NEUMÝVAJTE SAMOTNÉ SEDADLO, ČISTIŤ BY SA MAL IBA POŤAH SEDADLA**

**SKLADOVANIE**

Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

**SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA**

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....  
Sériové číslo:

.....  
Dátum predaja:

.....  
Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerazania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### **PRVÝ KONTAKT: Distribútor:**

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk); [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.06.2024  
v1-04.06.2024