

AT51193

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO



Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok. Pred jeho používaním si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehode. Preto si v záujme bezpečného a úspešného používania výrobku pozorne prečítajte túto príručku.

FUNKCIE

Chodítko AT51193 je vyrobené z kvalitného a odolného hliníka. Skladací rám uľahčuje prepravu. Chodítko je vybavené otočnými prednými kolesami a neotočnými zadnými kolesami s brzdou a parkovacou sponou. Výrobok je vybavený sedadlom a opierkou chrbta, ktoré umožňujú odpočinok v sede. Chodítko má aj praktickú tašku na drobný nákup.

ÚČEL/INDIKÁCIE

Chodítko je určené pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri pohybe. Je vhodné pre ľudí, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do každodenného života.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

UPOZORNENIA

Pred vykonaním akejkoľvek činnosti skontrolujte stav výrobku. Ak výrobok nefunguje správne alebo vyzerá neštandardne, okamžite kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

Pred použitím sa vždy uistite, že rukoväťe sú v správnej výške a že sú riadne zaistené. Aby sa predišlo riziku pádu, chodítko sa nesmie používať na nerovnom alebo šikmom povrchu. Pred použitím vždy skontrolujte stav kolies, brzd a celkovú stabilitu rámu.

POZOR: Pri používaní a obsluhu chodítka a pri skladaní a nastavovaní mechanizmov môže vzniknúť riziko zachytenia a/alebo stlačenia častí tela používateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným dotiahnutím matíc/skrutiek.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Pri nesprávnom používaní výrobku môže hroziť riziko prevrátenia. Dodržiavajte odporúčania týkajúce sa nastupovania/vystupovania/premiestňovania. Po nastavení stabilizujte polohu starostlivým utiahnutím matíc/skrutiek.

ROZSAH DODÁVKY

Chodítko, bočné rámy (x2), podrúčky s brzdami (x2), opierka na palicu, taška, návod na použitie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže užívateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Výber typu asistenčného zariadenia a jeho vhodnej konfigurácie musí vykonať kvalifikovaný zdravotnícky a technický personál na základe zdravotného stavu a podmienok používania zariadenia používateľom.

ROZLOŽENIE

1. Rozložte rám spustením priečných rúrok sedadla, potom zatlačte na boky sedadla, kým sa rúrky nezaistia a neozve sa charakteristický zvuk. Skontrolujte, či je chodítko správne rozložené.
2. Namontujte oba bočné rámy s medenými zámkami a nastavte ich do správnej výšky. (1/2)
3. Opierky rúk vrátane brzd by mali byť vložené do otvorov v bočných rámoch a utiahnuté pomocou gombíkov. (3)
4. Nakoniec nasadzte držiak na palice a pripievte tašku. (5)



1.

2.

3.


4.

5.

MONTÁŽ

Postupujte podľa vyššie opísaných krokov v opačnom poradí.

POUŽÍVANIE BRZD

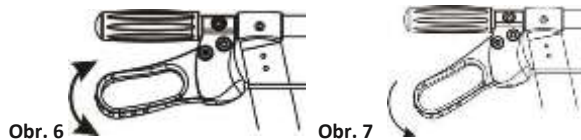

Obr. 6

Obr. 7

- 1 Ak chcete chodítko uvoľniť alebo zastaviť, zatiahnite za brzdovú páku. Uvoľníte brzdovú páku pre opätovný pohyb (obr. 6).
2. Ak chcete aktivovať parkovaciu brzdú, zatlačte brzdovú páku smerom nadol, kým sa nezablokuje (obr. 7).

TECHNICKÉ ÚDAJE

celková šírka 63 cm
šírka medzi drážkami 50 cm
celková hĺbka 71 cm
šírka sedadla 46 cm
hĺbka sedadla 25 cm
výška sedadla 54 cm
rozsah nastavenia výšky rúkovie 97 - 127 cm
kolieska 8"
hmotnosť 8,4 kg
max. hmotnosť používateľa 136 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

Chodítko skladujte mimo dosahu zdrojov svetla, tepla a vlhkosti. Nevystavujte chodítko priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Chodítko zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia a recyklácii.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Po každom použití odstráňte nahromadené nečistoty pomocou jemných čistiacich prostriedkov, najlepšie mydlovou vodou, a potom ich utrite suchou handričkou. Nepoužívajte ostré, abrazívne predmety. Pravidelne kontrolujte funkciu brzd, stav tesnení upevňovacích častí a stav zvarov.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 15.05.2023

v1-15.05.2023

