

AT52316

NÁVOD NA POUŽITIE – INVALIDNÝ VOZÍK



MD

CE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiете výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky diely, či sa nepoškodili počas prepravy. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE!** Ďalšie informácie získate od výrobcu.

INDIKÁCIE

Invalidný vozík je určený na prepravu osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktoré majú problémy so samostatným pohybom. Slúži ako opora počas pohybu. Odporúča sa aj pre starších ľudí a osoby s výrazne obmedzenou pohyblivosťou.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

- Ľudia, ktorí majú problémy s udržaním stabilnej polohy v sede v dôsledku svalovej slabosti alebo iných neurologických problémov, môžu potrebovať špecializovaný invalidný vozík s dodatočnou podporou.

Problémy s krvným tlakom - zmena polohy z ležiacej na sediacu môže spôsobiť problémy s krvným tlakom, napríklad ortostatické zníženie krvného tlaku, ktoré môže byť nebezpečné.

- Používanie invalidného vozíka nemusí byť vhodné pre ľudí, ktorí pociťujú akútnu bolesť, ktorá sa môže zhoršiť dlhým sedením v jednej polohe.

Chirurgické obmedzenia - po niektorých operáciách, ako je operácia chrbtice alebo veľká operácia brucha, môže byť vhodné vyhnúť sa sedeniu na invalidnom vozíku počas obmedzeného obdobia.

- Ľudia, u ktorých je osobitné riziko vzniku preležanín, môžu potrebovať špeciálne invalidné vozíky vybavené podložkami proti preležaninám alebo inými riešeniami na zníženie rizika vzniku preležanín.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- ľahký hliníkový rám
- sklápacie opierky rúk
- nastaviteľná dĺžka podnožky
- Bezpečnostný zámok, ktorý zabraňuje sklopeniu rámu
- parkovacia brzda pre opatrovateľa

OBSAH BALENIA

Invalidný vozík, návod na použitie

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: je zakázané používať výrobok na iný ako určený účel!

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnom používaní výrobku môže hroziť riziko prevrátenia. Pri nastupovaní/vystupovaní a premiestňovaní invalidného vozíka dbajte na zvýšenú opatrnosť.

UPOZORNENIE: Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či sú všetky komponenty v správnej polohe a v dobrom funkčnom stave.

UPOZORNENIE: Nenakláňajte sa cez bočnú stranu invalidného vozíka, pretože to môže viesť k strate rovnováhy a pádu.

UPOZORNENIE: Státie na opierkach nôh je zakázané. Mohlo by to viesť k prevráteniu vozíka a používateľa a spôsobiť vážne zranenie.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Pri nastupovaní alebo vystupovaní z invalidného vozíka sa uistite, že sú obe brzdy zatiahnuté.
- Je potrebné vyhýbať sa strmým a nerovným povrchom, pretože to môže spôsobiť prevrátenie výrobku.
- Vyhnite sa mäkkým povrchom, pretože kolesá sa môžu prepadnúť.
- Pohybujte sa s vozíkom plynule za všetkých podmienok.
- Vždy sledujte okolie a identifikujte nebezpečenstvá, ako je nábytok, dvere, diery, kopce, obrubníky, vchody atď.
- Obe nohy majte vždy na opierkach nôh a dbajte na to, aby bol odev správne zastrčený a nebránil kolesám.
- V kopcoch jazdite vždy opatrne.
- Na správne ovládanie invalidného vozíka majte vždy obe ruky na rukovätiach (platí pre opatrovateľa/sprievod).
- Vždy nezabúdajte na rovnováhu.
- Invalidný vozík udržiavajte mimo dosahu zdrojov ohňa.
- V žiadnom prípade by sa nemalo prekročiť maximálne zaťaženie výrobku.
- Na zadnú časť invalidného vozíka nezavesujte žiadne ťažké predmety, pretože to môže ovplyvniť stabilitu výrobku, najmä pri stúpaní do kopcov.
- Invalidný vozík môže naraz používať len jedna osoba.
- Nepoužívajte invalidný vozík, keď je pacient v bezvedomí.
- Na tlačenie invalidného vozíka nepoužívajte iné dopravné prostriedky.
- Počas jazdy nezdvíhajte predné kolesá, pretože to môže spôsobiť pád a vážne zranenie používateľa.
- Počas pohybu nenastupujte na invalidný vozík.

- Nejazdite s vozíkom príliš rýchlo a nerobte prudké zákruty.
- Nejazdite s invalidným vozíkom cez kopec (v oboch smeroch) so sklonom väčším ako 7 stupňov.
- Pri nastupovaní a vystupovaní z výrobku nestojte na opierkach nôh.
- Neprekonávajte schody pomocou invalidného vozíka.
- Nepokúšajte sa zdvíhať invalidný vozík s pohyblivými (odnímateľnými) časťami. Zdvíhanie s pohyblivými časťami výrobku môže viesť k zraneniu používateľa a/alebo opatrovateľa alebo k poškodeniu výrobku.
- Výrobok nenamáčajte.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozrite časť o určenom použití pomôcky – „INDIKÁCIE“ v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

ŠPECIFIKÁCIA/TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

Rozmery v zloženom stave (š.d.v.): 51x36x75 cm

Dĺžka: 96 cm

Šírka: 51 cm

Výška: 90 cm

Šírka sedadla: 42 cm

Hĺbka sedadla: 40 cm.

Výška od zeme po sedadlo: 48 cm.

Výška operadla: 37 cm

Opierka na nohy: 4 stupne nastavenia dĺžky (v krokoch po 2,5 cm)

Predné koleso: 6"

Zadné koleso: 8"

Typ kolies: pevné

Tlmič: predný









Maximálne zaťaženie: 100 kg

Čistá hmotnosť: 7,5 kg

Veľkosť balenia: 54*29*78 cm


Rám: hliníkový

SYMBOLY

	Výrobca
	Osvedčenie o zhode výrobku so základnými požiadavkami nariadení EÚ
	Zdravotnícke zariadenie
	Číslo dávky
	Dátum výroby
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Upozornenie
	Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa

MONTÁŽ/ZLOŽENIE VÝROBKU


- 1.Pred rozložením rámu uvoľnite bezpečnostnú poistku stlačením červeného tlačidla (obr. 1).
- 2.Potom rám rozložte vytiahnutím sedadla a zatlačením rukoväte smerom von až do úplného vysunutia. Aby ste sa uistili, že je invalidný vozík správne rozložený, zatlačte na sedadlo.
- 3.Rozložte opierky nôh a nastavte ich dĺžku pomocou dĺžkového dorazu (obr.4)
- 4.Nakoniec rozložte opierky rúk

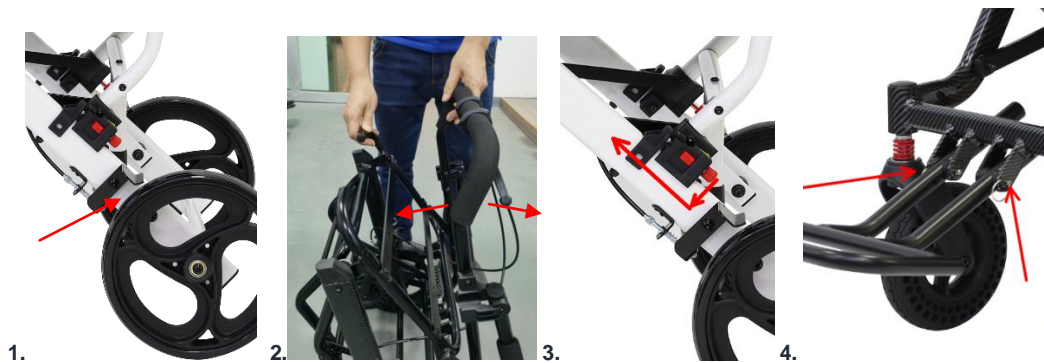

DEMONTÁŽ/ROZLOŽENIE VÝROBKU

Ak chcete výrobok demontovať (rozložiť), všetky vyššie uvedené kroky musíte vykonať v opačnom poradí.

POUŽÍVANIE BRŮZD

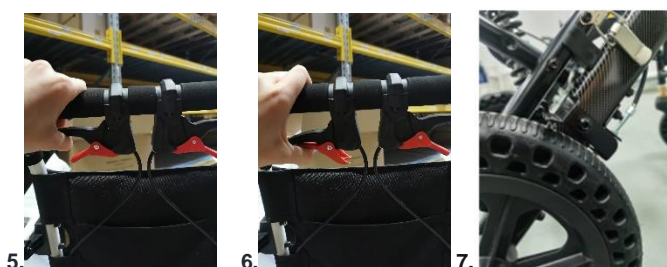

- Ak chcete zabrzdiť, stlačte čiernu rukoväť.
- Ak chcete uvoľniť zámok brzd, stlačte červenú rukoväť.

ČISTENIE VÝROBKU

Aby sa predĺžila životnosť invalidného vozíka, odporúča sa ho pravidelne čistiť (najlepšie denne), najmä ak sa používa v daždivom alebo zasneženom počasí. Odporúčame, aby ste výrobok nepoužívali v daždi alebo na snehu.

Výrobok čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

UPOZORNENIE: Na čistenie nepoužívajte hrubé predmety, silné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

ÚDRŽBA VÝROBKU

Všetky časti invalidného vozíka by sa mali pravidelne kontrolovať. Rám a pevné komponenty by sa mali skontrolovať pred každým použitím. Stav kolies by sa mal kontrolovať raz týždenne.

Na zabezpečenie dlhodobej a bezpečnej prevádzky výrobku sa odporúča pravidelne kontrolovať všetky skrutky a montážne komponenty. Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či sú všetky skrutky správne dotiahnuté a či nie sú viditeľné známky ich uvoľnenia.

Pravidelne kontrolujte, či na výrobku nechýbajú žiadne komponenty a či sú všetky komponenty v dobrom funkčnom stave. Ak spozorujete opotrebenie, mechanické poškodenie alebo chýbajúce časti, okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné oddelenie výrobcu, aby ste predišli riziku nehody alebo ďalšieho poškodenia.

Venujte pozornosť akýmkoľvek nezvyčajným zvukom alebo vibráciám, ktoré môžu poukazovať na uvoľnené komponenty alebo iné technické problémy.

Pri výmene skrutiek alebo komponentov nezabudnite používať len originálne diely odporúčané výrobcom.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPŮSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST


Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 20.05.2024
v1-20.05.2024